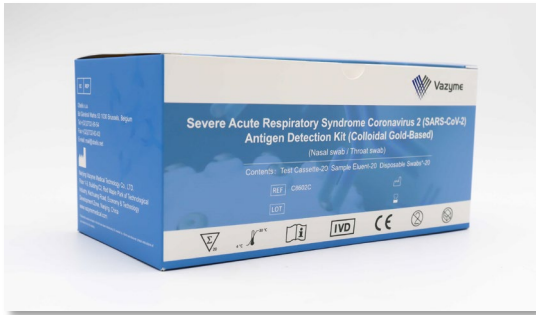


# 新型コロナウイルス (SARS-CoV-2) 抗原検出キット

迅速かつ利便性の高いイムノクロマトグラフ法でCOVID-19抗原を検出します



- +** 約10分で結果判定可能
- +** 咽頭、鼻咽頭のぬぐい液に対応
- +** 目視判定で特別な機器不要

## ■ 臨床データ (n=200)

	感度	特異度
陽性 (n=21) (Vazyme test kit/PCR)	100%	100%
陰性 (n=179) (Vazyme test kit/PCR)	100%	100%

※テストは海外の第三者機関において臨床検体を用いて検証

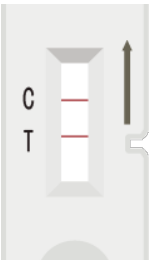

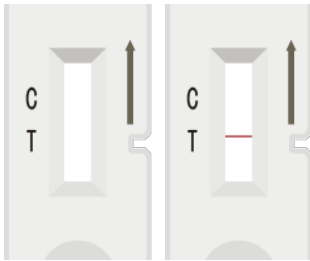
※陽性、陰性のサンプルはそれぞれの鼻腔ぬぐい液からの抽出液を検体として使用

## ■ 検出結果確認

陽性

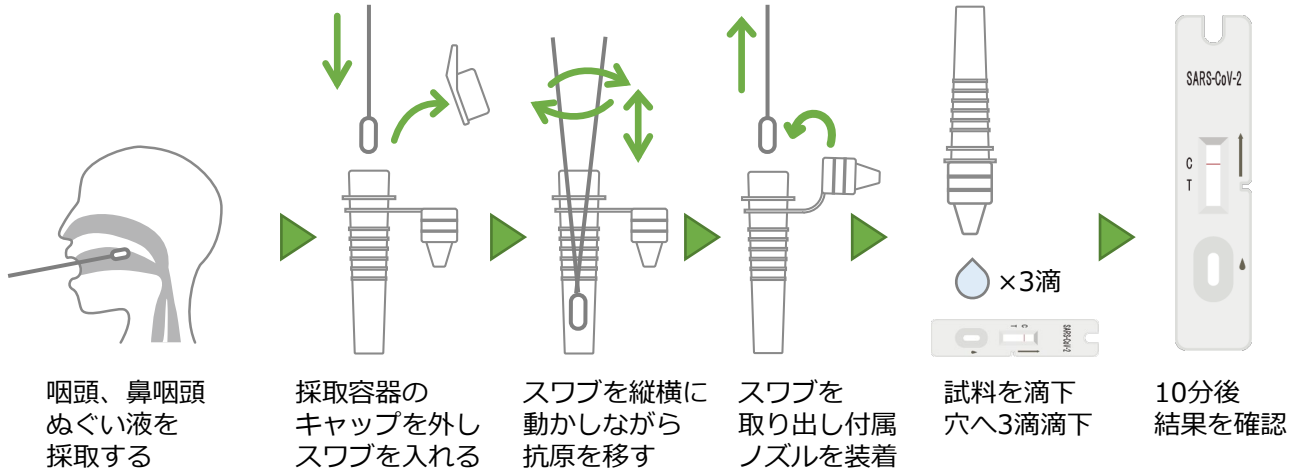
陰性

無効

※10分以上経過してもCライン（品質管理ライン）が出現しない場合は無効です

## ■ 操作方法



## ■ 製品概要

測定原理	イムノクロマト法
製品名	新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）抗原検出キット
使用目的	咽頭、鼻咽頭のぬぐい液中の新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）抗原を検出する
判定時間	試料滴下後、10分
貯蔵方法	4～30℃で保存
使用期限	テストカートリッジ外袋に表示（製造日から18カ月）

## ■ 使用上の注意

- 本製品は研究用試薬です。
- 検出キットの判定結果は治療および診断目的に使用することはできません。
- 本製品の使用により発生した損害及び損失について弊社は責任を負いません。

